


Aesculap® ELAN 4

Manual de limpieza y desinfección con adaptador de lavado.

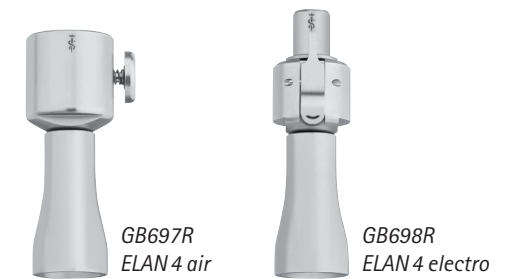


FASE I

- **Acoplar el adaptador de lavado a la pieza de mano.**
- Limpiar la pieza bajo chorro de agua, cepillar con cepillo plástico suave. Movilizar los componentes móviles (botones de color dorado en cada pieza).
- Aclarar el producto con pistola de agua a través del adaptador al menos **3 veces por 5 segundos.**




FASE II

- Utilizando una jeringa desechable, introducir solución enzimática a través del adaptador de lavado.
- Sumergir la pieza en solución enzimática con adaptador de lavado en **solución enzimática por 5 minutos.**



FASE III

- Aclarar bajo chorro de agua y movilizar todos los componentes móviles (botones de color dorado en cada pieza).
- Aclarar el interior de la pieza con pistola de agua a través del adaptador de lavado al menos **3 veces por 5 segundos.**




FASE IV

- Drenar el exceso de agua de cada pieza utilizando una pistola de aire a través del adaptador de lavado.
- Utilizando una jeringa desechable, introducir solución desinfectante a través del adaptador de lavado.
- Sumergir la pieza en solución desinfectante durante **15 minutos.**




FASE V

- Secar cada pieza de mano con toalla libre de pelusa y aire comprimido.
- Aclarar el interior de la pieza con pistola de agua a través del adaptador de lavado con al menos **3 veces por 5 segundos.**



FASE VI

- Secar cada pieza de mano con toalla libre de pelusas y aire comprimido.
- **Desacoplar el adaptador de lavado y revisar residuos en superficie.**
- Utilizar **GB600 STERILIT® Power Systems Oil Spray** con adaptador GB600860 a través de la parte posterior de cada pieza durante **1-2 segundos.**



⚠ Mantener siempre conectado el adaptador de lavado durante el proceso completo (Fase I – VI).

El operador es el único responsable de garantizar un reprocesamiento exitoso. Preste especial atención a la información e instrucciones relevantes en las instrucciones de uso, entregadas con el producto así como a los reglamentos y normas legales nacionales aplicables. Las instrucciones de uso y reprocesamiento de dispositivos médicos Aesculap se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.aesculap.de/reprocessing